

ASTOPAD[®] Baby Warmer

**Nyfödda ligger skönt och behagligt,
omgivna av en skyddande värme.**



STIHLERELECTRONIC

ASTOPAD® Baby Warmer

En effektiv produkt som kan vårda två spädbarn samtidigt.

ASTOPAD Baby Warmer omger prematura och nyfödda barn med en behaglig, skyddande värme. Den kan användas i alla typer av sängar, utan att hindra den viktiga kontakten mellan mor och barn, eftersom mamman utan problem kan amma och sköta om sitt barn.


Prematura och nyfödda spädbarn som inte behöver någon ytterligare intensivvård i kuvös, värms på ett tryggt sätt av ASTOPAD Baby Warmer. På ett enkelt och lönsamt sätt kan alla spädbarn få ett skönt värmetycke, så att de kan sova bra och utvecklas på ett optimalt sätt.

ASTOPAD Baby Warmer kan både användas som värmande liggunderlag och/eller över barnet som extra värmetycke.

Om den används som liggunderlag kan den användas i två barnsängar oberoende av varandra, med hjälp av en reglerenhet, något som gör den mycket lönsam att använda.

ASTOPAD Baby Warmer kan användas inom många olika områden.


- På spädbarnsavdelningen som termiskt långtidsstöd för ett eller två spädbarn.
- I förlossningsrummet som föruppvärmning av barnsängen.
- Som uppvärmning av sängen i uppvakningsrum.
- I operationssalen för att förebygga hypotermi.

The image shows two newborn babies lying in separate incubators. Each incubator has a clear plastic enclosure and a metal frame. The babies are wearing white clothing. The ASTOPAD Baby Warmer unit is mounted on a stand to the left of the incubators. It has a control panel with a digital display and several buttons. Two power cables are plugged into the unit. The background is a plain, light-colored wall.

Två nyfödda barn på spädbarnsavdelningen kan värmas oberoende av varandra med reglerenheten. En fördel som gör att ASTOPAD Baby Warmer är en av de mest lönsamma lösningarna, vid uppvärmning av nyfödda.

Avkylda spädbarn blir snabbt varma igen i hela kroppen!

Med en reglerenhet och 2 värmeelement kan ett nedkylt spädbarn hållas varmt både ovanifrån och underifrån samtidigt – direkt på förlossningsavdelningen.

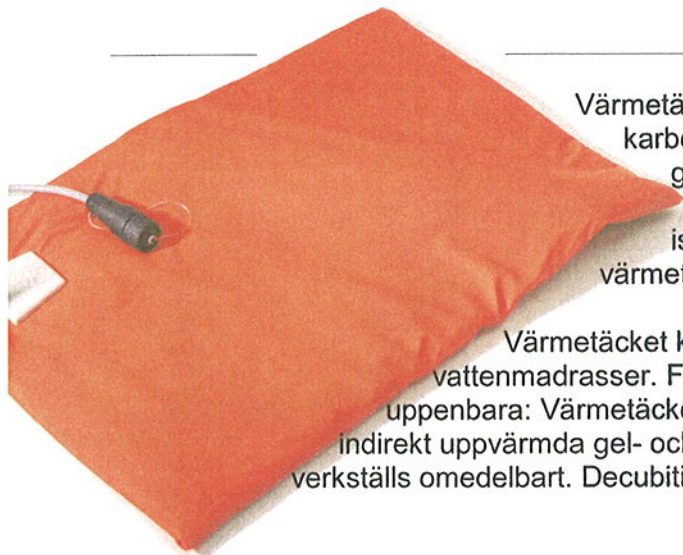

Värmetäcket ASTOPAD COV 070 har ett röntgenomsläppligt karbonvärmeelement. 8 inbyggda temperatursensorer garanterar en exakt temperaturreglering och övervakar alla säkerhets- och alarmfunktioner. Två termiska isolationslager och det hudvänliga överdraget gör värmetäcket mjukt och följsamt.

Värmetäcket kan användas på alla slags madrasser, även gel- och vattenmadrasser. Fördelarna jämfört med andra värmande liggunderlag är uppenbara: Värmetäcket värms aktivt och kan därmed användas snabbare än indirekt uppvärmda gel- och vattenmadrasser. Ändrade temperaturinställningar verkställs omedelbart. Decubititsprofylaxen i underlaget bibehålls.



Med reglerenheten ASTOPAD DUO 120 kan två ASTOPAD värmeelement regleras oberoende av varandra. Antingen kan två babysängar värmas samtidigt eller så kan en baby värmas ovan- och underifrån samtidigt.

Temperaturen kan ställas in exakt i steg på 0,5°C i området 32°C – 39°C för vardera värmeelementet oberoende av varandra. Reglerenheten övervakar kontinuerligt alla alarm vid över- och undertemperatur. Den belysta displayen och den enkla hanteringen ger ett säkert system.


ASTOPAD Baby Warmer kan användas inom många olika områden.



Vid operationer
ASTOPAD Baby Warmer kan användas för spädbarn och småbarn, både före, under och efter operationer. Värmeelementet är röntgenomsläppligt och desinficerbart.





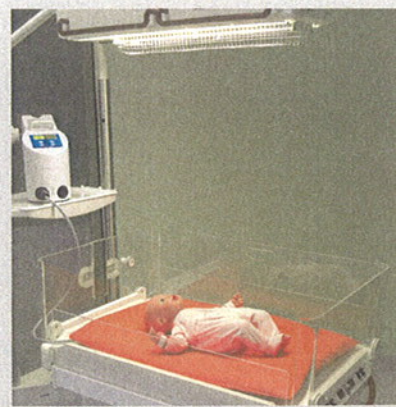






Vid undersökningar
Överallt där nyfödda undersöks och löper risk att kylas ned – i förlossningsrummet, på operations- eller spädbarnsavdelningen – kan de skyddas med ASTOPAD Baby Warmer.




I uppvakningsrum
Uppvakningsrum, som inte har någon inbyggd sänguppvärmning, kan på ett mycket enkelt sätt kompletteras med ASTOPAD Baby Warmer.

Överblick ASTOPAD Baby Warmer

Beteckning	Beskrivning	Best.-nr:
 ASTOPAD DUO Reglerenhet	Ljudlös, permanent drift dygnet runt, B x H x D 180 x 260 x 210 mm, vikt 4,2 kg, 220-240 V, 50 Hz, utgångsspänning 24 V, effekt max. 200 VA, alarmfunktioner för över- / undertemperatur, kabelbrott och strömavbrott, reglering av 2 värmeelement oberoende av varandra. Hängs på droppställning.	DUO 120
 ASTOPAD COV 070 Värmetäcke	Lågspänning 24 V, flexibelt och följsamt, röntgengenomsläppligt, mått: 680 x 480 mm, värmeeffekt max. 60 W, karbonfiber-värmeelement som kontrolleras av 8 NTC-temperatursensorer, kan tvättas av och desinficeras. Används som täcke och underlag. Inklusive en anslutnings-förlängningssladd.	COV 070
	Tvättbart (95°C), desinficerbart överdrag för COV 070.	COV 40070
	Bomullsöverdrag, tvättbart (95°C) för COV 070.	COV 20070
 ASTOGEL OPG 168 Gelmadrass	Optimal gelmadrass för barnsängar eller på operationsbordet som decubitusprofylax, Mått: 680 x 450 x 15 mm.	OPG 168
	Kabelhållare för två stycken anslutnings-förlängningskablar, för fastsättning på infusionsställ (max. 25 mm extern ytterdiameter).	STA 140
	Hållare för säker fastsättning av ASTOPAD DUO reglerenhet i medicinska standardskenor.	STA 120
	Droppställning ASTOSTAND för säker upphängning av ett flertal medicinska apparater, t.ex. ASTOPAD DUO reglerenhet.	STA 100
	Sladd för anslutning av ASTOPAD COV värmetäcke till reglerenheten ASTOPAD DUO120, finns i olika längder.	COV 50XXX

- ASTOPAD-systemet kan även användas på barn och vuxna, i operationssalen och på vårdavdelningar. Det finns ett stort urval ASTOPAD värmeelement och tillbehör.
Vi skickar gärna mer information på begäran.

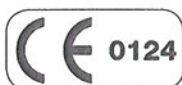

ASTOPAD Baby Warmer uppfyller kraven enligt följande normer: EN 60601-1; EN 60601-1-2 och EN 60601-2-35

Aterförsäljare:

STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH

Julius-Hölder-Straße 36 · 70597 Stuttgart · Germany

www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de

national: Telefon 07 11- 72 06 70 · Telefax 07 11- 720 67 57

international: Telefon ++ 49- 711- 72 06 70 · Telefax ++ 49- 711- 720 67 57